




1" Turbo

# SWAN+

Lampada polimerizzatrice  
ad ampio spettro  
con lenti magnetiche di precisione

## ◎ Ampio spettro avanzato

Led di nuova generazione  
a diverse lunghezze d'onda 385-515nm;  
producono luce ad alta intensità  
in grado di polimerizzare tutti i materiali dentali  
fotopolimerizzabili e luce viola diagnostica.

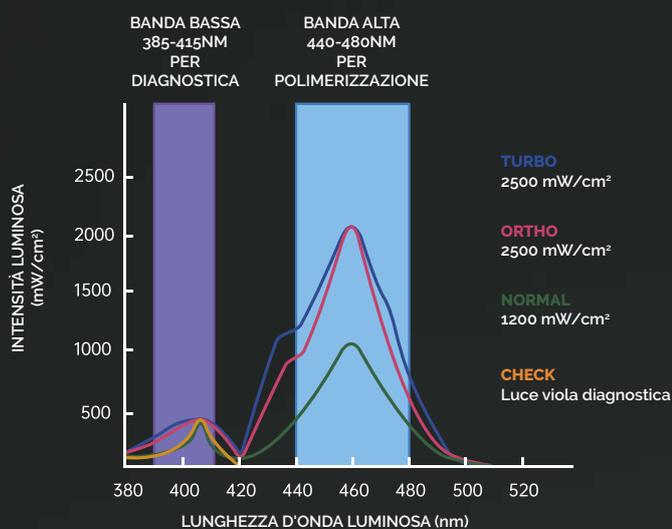

## ◎ Intensità costante

Circuito a compensazione automatica  
per una potenza di emissione costante


## ◎ Funzionale

4 modalità operative: Turbo, Normal, Ortho, Check.  
Chip di gestione intelligente,  
base di ricarica rapida senza surriscaldamento.  
Misuratore di intensità luminosa integrato  
nella base di ricarica.



## ◎ Fascio di luce collimata

Con un'ottica avanzata che crea un'eccellente luce collimata attraverso una lente da 10mm, la lampada polimerizzatrice SWAN+ fornisce un irraggiamento collimato ottimale e costante. Il corpo mono blocco in alluminio di grado elevato assicura un'eccellente dissipazione del calore e permette un facile accesso diretto a qualsiasi sito da polimerizzare. I pazienti percepiscono un maggiore comfort. Include la funzione CHECK con luce viola per l'identificazione delle carie.

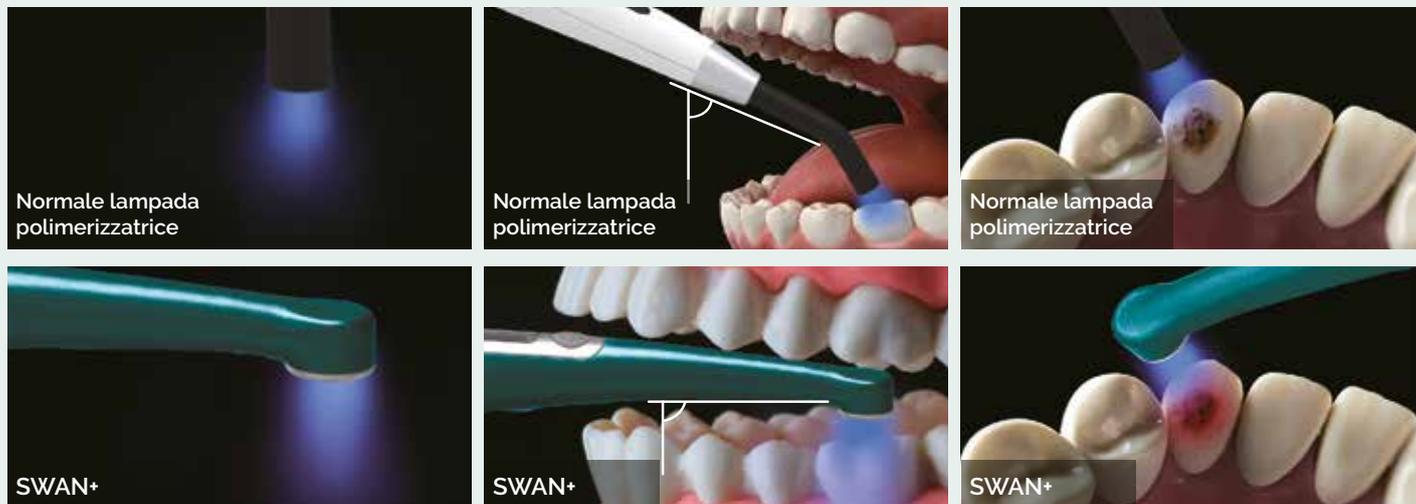

## ◎ Lenti polimerizzatrici con micro sfera

Facilitano la costruzione di contatti prossimali convessi, la sfera consente di premere sulle pareti senza immergersi nel composito.

## ◎ Lenti di precisione

Fornisce un punto di polimerizzazione focalizzato per piccoli restauri, ideale per posizionare le faccette.

## ◎ Lente con puntale endodontico

Il mini puntale consente di polimerizzare l'apice ed altre aree di difficile accesso.



## Componenti

- 1 Manipolo
- 2 Base di ricarica
- 3 Adattatore
- 4 Schermo
- 5 Lenti di precisione
- 6 Guaine monouso
- 7 Istruzioni
- 8 Certificato di qualità

